

アプロサイエンス 電気泳動ゲル染色試薬

2016年8月31日まで

Protein Electrophoresis Gel Staining


Spring & Summer キャンペーン



製品名 / 製品コード	染色感度	液交換回数	所要時間
高感度CBB染色キット SP-4010		6回	3 hr
MS用銀染色キット SP-4020		12回	2 hr
One-Step Ruby SP-4040		1回	1.5 hr

高感度CBB染色キット

- 独自の増感試薬により高感度検出を実現
- 刺激の強い酢酸、メタノール不含
- 1液で染色可能なready to useタイプ

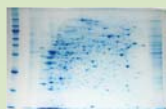

【実施例】マウス肝臓抽出物
総タンパク質 (30ug相当)



CBB染色液 1L
エンハンサー 100mL

CBB染色液中に浸すと、数分後からバンドが見え始めます。
1時間程度染色してから超純水で洗浄(1時間)すれば、10~
20ng 程度のバンドが認識できるようになります。
さらに高感度染色をしたい場合は、エンハンサーを加えて
増感することで、3-5ng程度のバンドまで染色できます。

Free
sample
ご依頼はWebで!

MS用銀染色キット

- 質量分析に最適化(グルタルアルデヒド不含)
- 高感度の染色が可能
- 染まりにくい塩基性タンパク質でも高感度に染色可能



【実施例】マウス肝臓抽出物
総タンパク質 (30ug相当)



Free
sample
ご依頼はWebで!

蛍光ゲル染色試薬 One-Step Ruby

- 溶液交換不要・迅速(90分)に操作完了
- 1ng/band まで検出可能な蛍光ゲル染色



Free
sample
ご依頼はWebで!

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
高感度CBB染色キット	1キット	SP-4010	¥ 18,000	¥ 14,400
高感度CBB染色液	1L	SP-4011	¥ 15,000	¥ 12,000
MS用銀染色キット(+脱銀染色)	1キット	SP-4020	¥ 19,000	¥ 15,200
MS用銀染色キット	1キット	SP-4021	¥ 18,000	¥ 14,400
蛍光ゲル染色試薬One-Step-Ruby	1L	SP-4040	¥ 30,000	¥ 24,000



株式会社 アプロサイエンス

☎ 088-683-7211 □ info@aprosci.com

http://aproscience.com/

【徳島本社】〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島124-4
TEL:088-683-7211 FAX:088-683-7212

※掲載の商品は、全て「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用には使用しないよう、十分ご注意ください。

※掲載されている価格は希望小売価格です(消費税は含まれておりません)。掲載内容は、2016年5月現在のものです。予告無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売店